

継続

ディスクス吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID: _____

_____ 病院 _____ 科 _____ 医師

調剤薬局名: _____

指導を受けた方: _____ 担当薬剤師名: _____ 先生

☐ご本人 ☐ご家族 ☐その他

指導日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

FAX送信先：関東労災病院薬剤部
FAX:044-411-8650 TEL:044-411-3131（代表）

商品名: _____ 用法用量: _____

★の項目が指導後も×の場合は、治療継続不可とします。			指導前	指導後
準備		カウンターで残量を確認できる。	○・X	○・X
		カウンターを手前にして、水平にカバーを開けられる。	○・X	○・X
		カチッと音がするまでレバーをしっかりと押す。	○・X	○・X
吸入		持っているときに通気口を塞いでいない。	○・X	○・X
		吸入前の息吐きができる。	○・X	○・X
	★	ホイッスルが鳴る。（吸入に必要な吸気流速がある。）	○・X	○・X
		5秒間の息止めができる。	○・X	○・X
		吸入後の息吐きができる。	○・X	○・X
片付け		カバーを閉める前にマウスピースをふき取る。	○・X	○・X
		使用後はカバーを閉める。	○・X	○・X
うがい		うがいができる。	○・X	○・X
		うがいの必要性を理解している。	○・X	○・X

◆ 使用中または今回使用を追加した補助器具にチェック☑して下さい。
☐練習用プラセボ吸入器 ☐練習用トレーナー（笛）

◆ 症状の評価（☐A C T/☐mM R C ※使用した方に☑して下さい。） 結果_____

◆ 残薬:_____吸入（使用済みデバイス_____個）

◆ 副作用の出現：なし・あり（口渇・頻尿・嘔声・口腔内違和感・その他_____）

◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可


⇒不可理由（デバイス変更は一覧[H P 参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項
（指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。）

ディスクス 1/2

2016.11作成

ディスクス 各部位の名称 (薬品名: アドエア、セレベント、フルタイド)

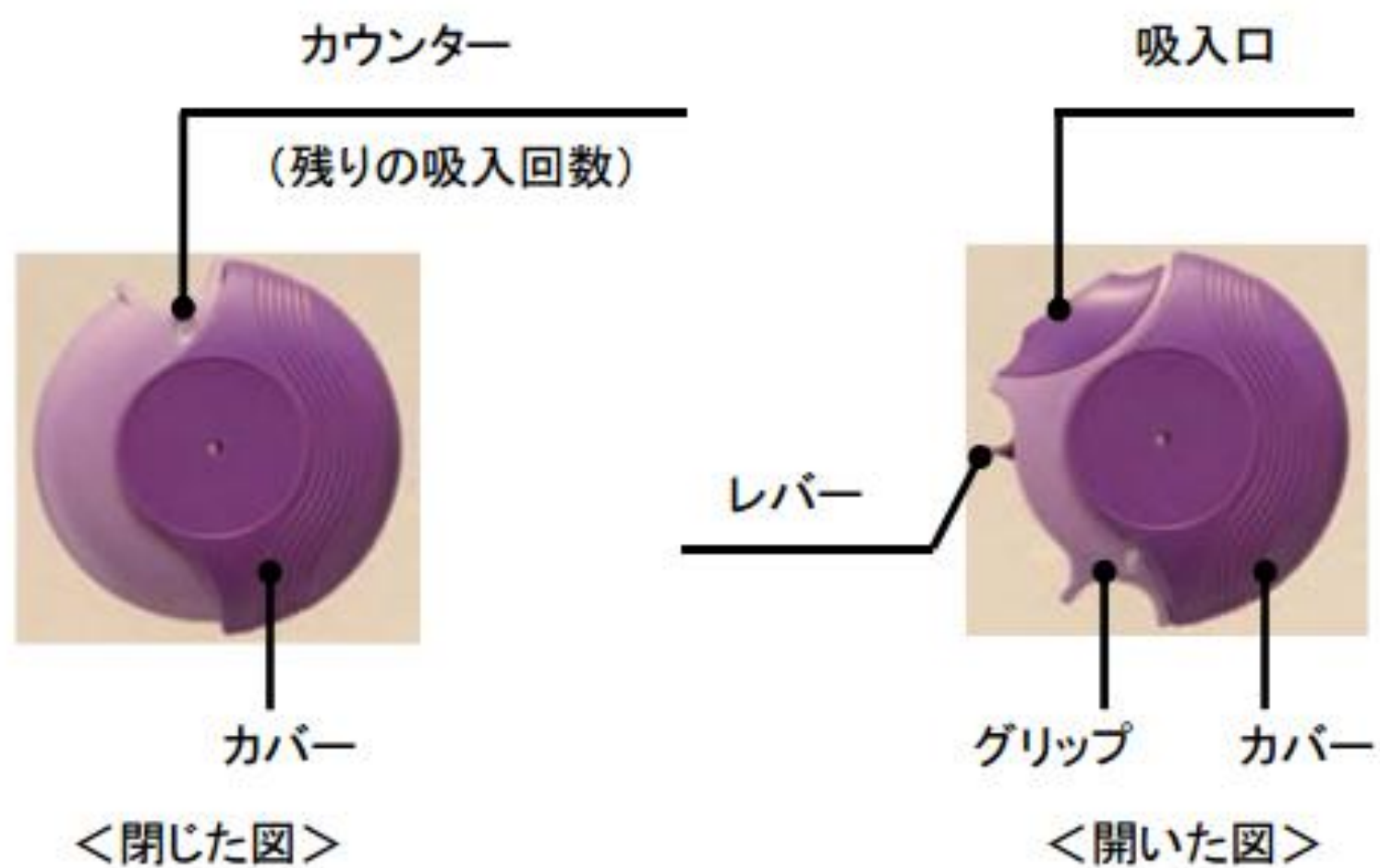

ディスクスの吸入手順(患者さん用)

【薬品名:アドエア】

※ 操作はカウンターを上にして、すべて水平に行ってください。

①薬の準備

- カウンターで残量を確認します。
- カウンターを上にして、水平にカバーを開けます。
- レバーをしっかり押します。(カチッと音がします)



②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。




④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

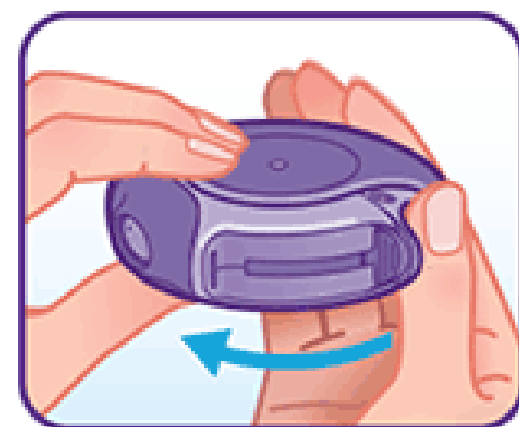


⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります。
- 使用後はカバーを閉めます(レバーも一緒に戻ります)


※もう1度吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

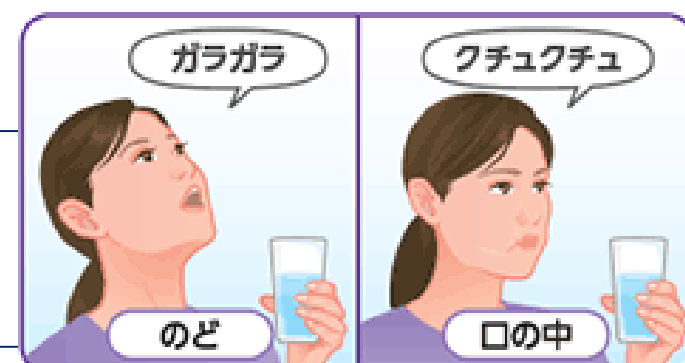

ディスクス 各部位の名称 (薬品名: アドエア、セレベント、フルタイド)

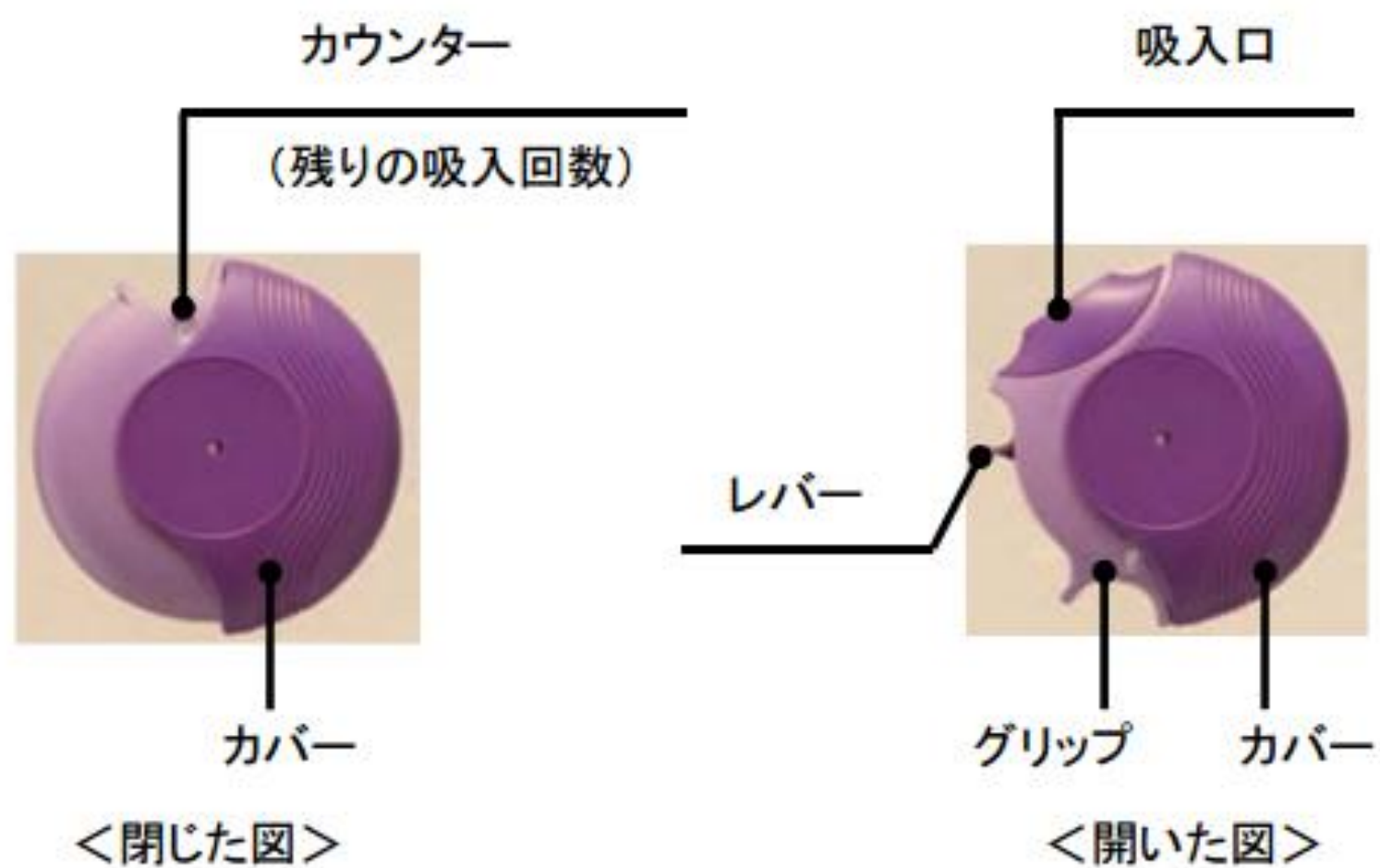

ディスカスの吸入手順(薬剤師用)
【薬品名:アドエア】

※ 吸入操作練習用具(笛付)でホイッスル音の確認をします。
※ 操作はカウンターを上にして、すべて水平に行ってください。

ホイッスル音が鳴ると、
ちょうど良い吸入速度です。
その感覚を覚えてもらいましょう。
鳴らないときは
吸入速度が足りません。

①薬の準備

- カウンターで残量を確認します。
- カウンターを上にして、水平にカバーを開けます。
- レバーをしっかり押します。(カチッと音がします)

カウンターが“0”になっても
レバーは押せますが、
薬剤は残っていません。

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。

吸入出来ていると、
わずかな甘みや粉感を感じます。
感じない場合は、レバーを動かさず、
そのままで②～⑤を行います。

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

肺内への薬剤の沈着率を高めるため
息止めが必要です。
ただし、無理はさせないこと。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

カバーを閉める前に、吸入口を
拭くように指導します。
もしもレバーを戻しても
問題はありません。

⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります。
- 使用後はカバーを閉めます(レバーも一緒に戻ります)

※もう1度吸入をする場合

吸入ステロイドは口腔内
カンジダや嚥声などの
副作用を防止するため
吸入後すぐにうがいをします。
それ以外の吸入薬も統一化を
図るため、うがいを
行うように指導します。

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。